



milenia biotec

Wir bringen Diagnostik näher zum Patienten

Milenia® POCScan Reader

Schnelle, flexible Auswertung der Milenia® QuickLine Tests

Reader

Milenia®POCScan Reader ist ein Stand-alone Messgerät für die quantitative Auswertung der Milenia® QuickLine Schnelltests.

Durch seinen PC-unabhängigen Einsatz können die **Point-of-Care Tests** von Milenia Biotec **flexibel an jedem Ort** eingesetzt werden.

Testdurchführung:

- Die Milenia® QuickLine Testeinheit in die Schublade des Milenia®POCScan Reader legen
- Probe auf die Testeinheit pipettieren
- Messung starten
- Nach der testspezifischen Inkubationszeit wird das Ergebnis automatisch angezeigt und gespeichert



Leistungsmerkmale

- Stand-alone Gerät
- Quantitative Auswertung der Milenia® QuickLine Schnelltests
- Speicherung von bis zu 100 Ergebnissen im Gerät
- Gerätefunktionskontrolle
- Validitätsprüfung der Ergebnisse durch die Firmware
- Optional:
 - Datentransfer auf einen PC mit der LFC Software möglich
 - Thermodrucker (auf Anfrage)

Ihre Vorteile

- Tragbares Gerät, einsetzbar an jedem Ort
- Zeitnahe Diagnostik, direkt am Krankenbett
- Einfache Bedienung, wartungsfrei
- Minimaler Zeitaufwand
- Geringe Personalbindung

Allergie ▼ Milenia Biotec GmbH · Versailler Str. 1 · 35394 Gießen

Autoimmun ▼ Tel: ++49 (0) 641-94 888 3-0 · Fax: ++49 (0) 641-94 888 3-80

Immunologie ▼ Internet: www.milenia-biotec.de · E-mail: info@milenia-biotec.de


Infektion ▼ Geschäftsführer: Dr. Ralf Dostatni · HRB 6805 Gießen · USt-IdNr.: DE813002127

Lieferumfang

- Gerät:
 - Maße: 4,6 x 17,8 x 16,5 cm
 - Gewicht: 620 g
- Netzteil zum Laden der Akkus
- Handbuch
- USB Kabel
- Hartschalen-Transportkoffer

Beispiel-Ergebnis

Das Ergebnis wird im Display angezeigt und automatisch gespeichert.

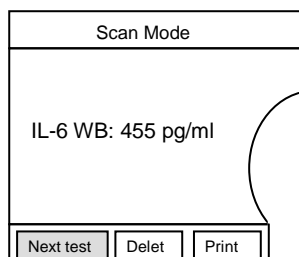

Verfügbare Milenia® QuickLine Produkte

Produkt	Artikel-Nr.	Tests/Kit	Preis*
Milenia® POCScan Reader	MSCAN 1	1 Gerät	2.495 EUR
IL-6 Whole Blood	MQL6B 1	20	339 EUR
IL-6 WB Control	MQCO6B 1	2x 1 ml	85 EUR
IL-6	MQL6 1	20	308 EUR
IL-6 Control	MQCO6 1	2x 3 ml	65 EUR
TNF-α amniotic	MQLTA 1	20	308 EUR
TNF-α amniotic Control	MQCOTA 1	2 x 3 ml	65 EUR
TNF-α ex vivo	MQEVS 1	30	450 EUR
TNF-α ex vivo Control	MQCOEV 1	2x 3 ml	65 EUR
C-reaktives Protein (CRP)	MQLRP 1	30	145 EUR
Free IgE	MQFE 1	20	440 EUR
Total IgE	MQTE 1	20	165 EUR
<i>Für die Forschung:</i>			
Cytostick IP-10	MCP10 1	100	490 EUR
Cytostick IFN-γ	MCIFN 1	100	490 EUR
HybriDetect	MGHD 1	100	205 EUR
HybriDetect HS	MGHT 1	40	158 EUR
HybriDetect zT	MGHD2 1	100	246 EUR
Carrier	MGCA 1	15 Stück	6 EUR

* Alle Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer